




Слуховые аппараты и индивидуальные вкладыши

-  Подготовка слухового аппарата к использованию
-  Правила хранения и обслуживания
-  Рекомендации по уходу



Обслуживание слуховых аппаратов



Правильный и регулярный уход продлевает срок службы слухового аппарата и помогает ему работать исправно.

Ниже – основные правила такого ухода.

- 1 Когда не носите слуховые аппараты – выключите их, положите в футляр. Храните в сухом и прохладном месте, недоступном для детей и животных
- 2 Берегите слуховые аппараты от влаги, прямого солнца и нагревательных приборов
- 3 Соблюдайте гигиену кожи головы и волос
- 4 Вода и спирт вредят слуховым аппаратам. Не мойте их и не протирайте спиртосодержащими растворами

Снимайте слуховые аппараты:

- когда идёте в душ, баню или бассейн
- перед сном
- перед укладкой и макияжем
- на рентгене, КТ и МРТ



Не разбирайте и не ремонтируйте аппараты самостоятельно. Для ремонта и сервисного обслуживания – обратитесь в центр хорошего слуха.

Как включить слуховой аппарат



Слуховые аппараты на батарейках включаются и выключаются через батарейный отсек. В перезаряжаемых моделях нет батарейного отсека, поэтому аппарат включают и выключают долгим нажатием кнопки.

Используйте только батарейки для слуховых аппаратов: типоразмера 10, 13, 312 или 675*.

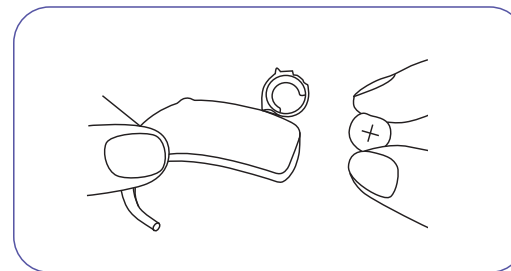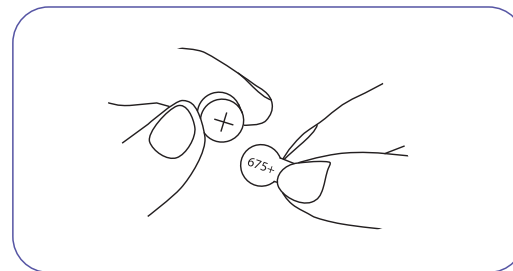

- 1 Снимите защитную наклейку с батарейки и подождите 3 минуты.
- 2 Откройте батарейный отсек и поместите в него батарейку в соответствии с полярностью – плюсом «+» вверх.
- 3 Аккуратно закройте крышку. Если отсек закрывается без усилий – батарейка вставлена правильно.
- 4 Слуховой аппарат включается, когда в него вставлена рабочая батарейка, а батарейный отсек плотно закрыт.
- 5 Чтобы выключить аппарат – полностью откройте крышку батарейного отсека.

*Нужный типоразмер указан в инструкции к вашей модели аппарата.

Когда вы не используете слуховой аппарат, который работает на батарейке, открывайте батарейный отсек, чтобы воздух свободно циркулировал.

Если слуховой аппарат внезапно отключается – проверьте заряд батарейки специальным тестером:

- поместите батарейку в тестер плюсом «+» вверх
- сдвиньте батарейку по направлению стрелки. На дисплее отобразится уровень заряда




Уход за слуховыми аппаратами

Слуховые аппараты необходимо ежедневно просушивать с помощью контейнера и высушивающей капсулы. Это относится и к заушным, и к внутриушным моделям.

Заушные и внутриушные слуховые аппараты


- 1 Откройте батарейный отсек и отсоедините вкладыш от аппарата. Если модель перезаряжаемая – выключите долгим нажатием кнопки.
- 2 Поместите слуховой аппарат в специальный контейнер с высушивающей капсулой.
- 3 Плотнo закройте крышку контейнера и оставьте на ночь. Капсулу можно использовать до тех пор, пока жёлтый индикатор не побелеет.

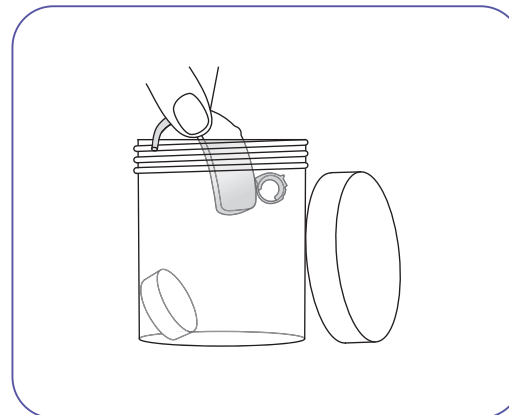

Гигиеническая станция

Для сушки и дезинфекции можно использовать гигиеническую станцию.



- 1 Извлеките батарейку из слухового аппарата и оставьте батарейный отсек открытым. Для перезаряжаемого аппарата: выключите его долгим нажатием кнопки.
- 2 Если аппарат заушный – отсоедините вкладыш.
- 3 Положите слуховой аппарат и вкладыш в гигиеническую камеру для сушки и чистки ультрафиолетом.
- 4 Включите станцию, выберите время сушки и дезинфекции.

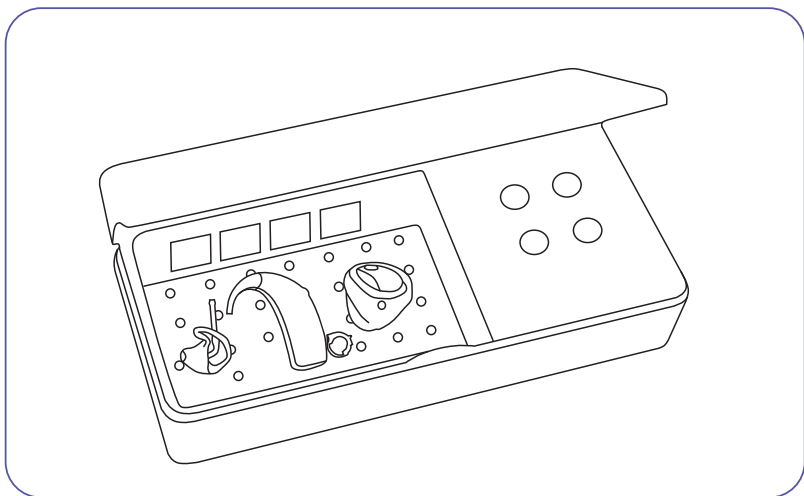

Внутриушные слуховые аппараты

Для ухода за внутриушными моделями выполните ещё несколько шагов.

- 1 Используйте щёточку и мягкую сухую ткань из комплекта, чтобы очистить звуковое, микрофонное и вентиляционное отверстия.
- 2 Очистите вентиляционное отверстие инструментом для удаления ушной серы. Пропустите его через вент так, как показано на рисунке.
- 3 Удалите загрязнения и ушную серу вокруг серного фильтра, который находится в звуковом отверстии. Фильтр не даёт сере попасть внутрь слухового аппарата.
- 4 Меняйте серный фильтр не реже, чем раз в две недели.

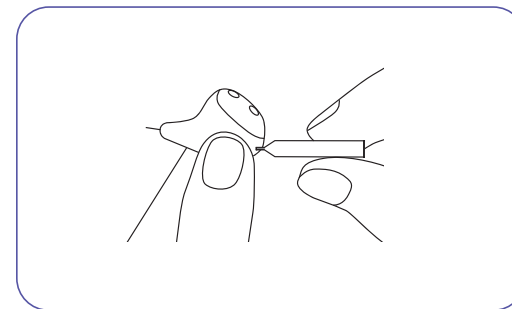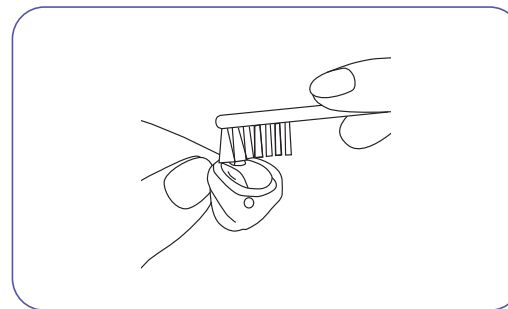

Индивидуальный ушной вкладыш





Ушной вкладыш – важная часть слухового аппарата и связующее звено между самим аппаратом и ухом. Важно, чтобы вкладыши плотно прилегли к слуховому проходу, хорошо проводили звук и не доставляли дискомфорта в течение дня.

Для этого в «Радуге звуков» изготавливают индивидуальные вкладыши на основе слепка слухового прохода.

Как установить вкладыш

- 1 Присоедините трубку-звуковод и вкладыш к слуховому аппарату.
- 2 Слегка потяните ушную раковину вверх и назад. Это облегчит установку вкладыша в ухе.
- 3 Возьмите вкладыш большим и указательным пальцами и осторожно поместите в слуховой проход.
- 4 Расположите слуховой аппарат за ушной раковиной.

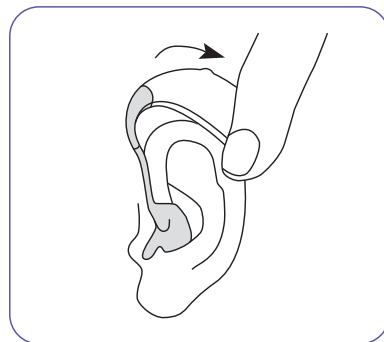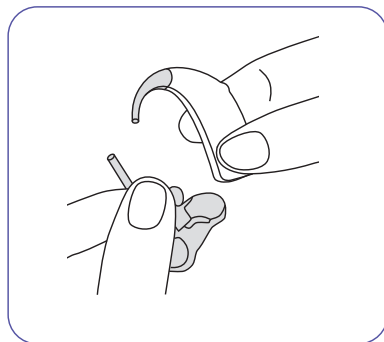

- Чтобы поправить вкладыш в слуховом проходе – слегка нажмите на него указательным пальцем. Если никакого дискомфорта не возникло, вкладыш установлен правильно.
- Следите за тем, чтобы трубка-звуковод не перекручивалась, когда вы надеваете и снимаете слуховой аппарат.
- Звуковод должен оставаться мягким и упругим. Когда становится жёстким – меняйте его на новый.
- Форма и размер слухового прохода со временем меняются, поэтому периодически изготавливайте новый вкладыш.




Уход за индивидуальным ушным вкладышем




Очищайте вкладыш средствами для ухода каждый день. Так вы продлите срок его службы и обеспечите хорошее звукопроведение.

1

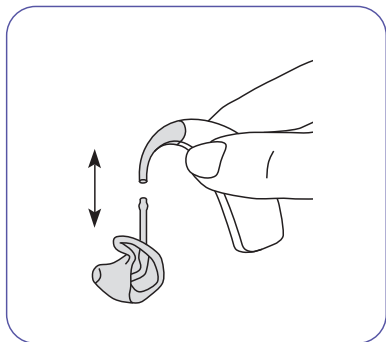


Аккуратно отсоедините трубку-звуковод от рожка слухового аппарата

2

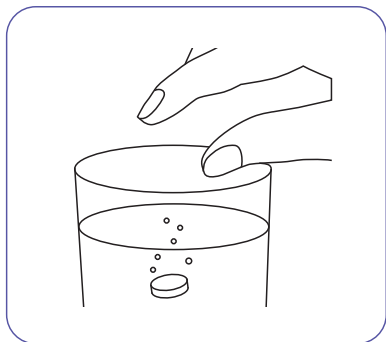


Растворите чистящую таблетку в специальном контейнере с водой

3

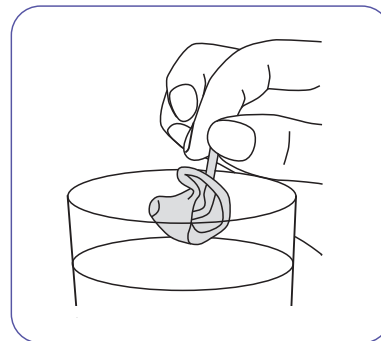


Опустите вкладыш и трубку-звуковод в контейнер с раствором. Оставьте на 20-30 минут

4

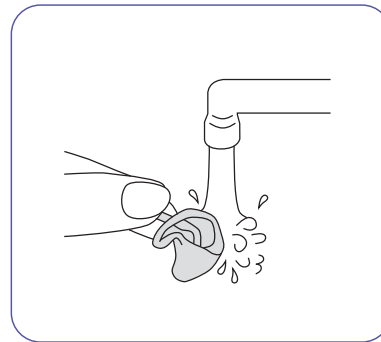


Промойте вкладыш с трубкой в тёплой проточной воде

5

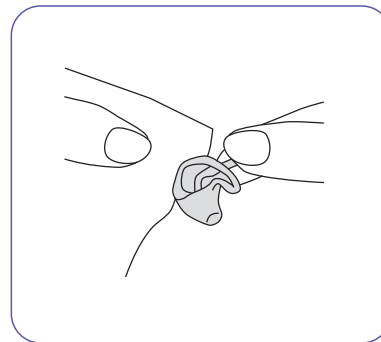

Протрите мягкой тканью

6

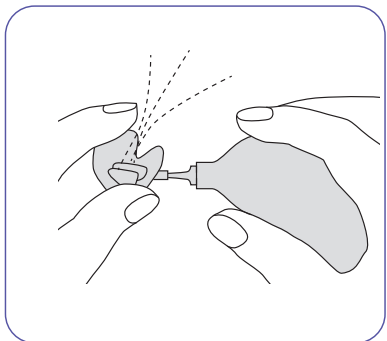

Используйте грушу-баллончик, чтобы удалить влагу из звукового канала вкладыша. Также продуйте трубку-звуковод

7

Положите вкладыш на мягкую сухую ткань и оставьте на ночь. Либо используйте гигиеническую станцию для сушки. Убедитесь, что трубка и вкладыш полностью высохли и только после этого присоедините к слуховому аппарату.




Средства для ухода




Для ухода за индивидуальными вкладышами и берушами рекомендуем использовать дезинфицирующие салфетки и спрей Cedis. Это эффективные средства против бактерий и грибков.

1

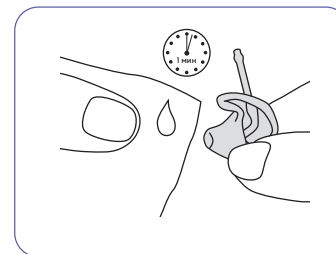


Обработайте поверхность вкладыша или беруши. Подождите 1 минуту

2

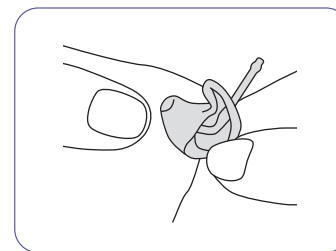


Протрите насухо салфеткой, которая хорошо впитывает влагу

3

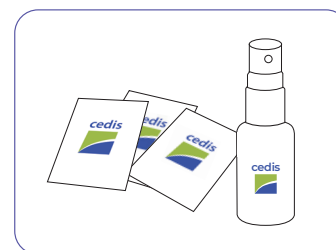

Следите за гигиеной ушей: ежедневный уход продлевает срок службы слуховых аппаратов, вкладышей и берушей. Для удаления загрязнений с поверхности ушной раковины можно использовать обычные влажные салфетки.

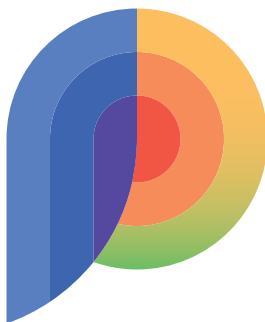

Радуга Звуков

141195, г. Фрязино, Московская обл., Заводской проезд 3а

8 (800) 770 71 39

orp@radugazvukov.ru

radugazvukov.ru, vashiberushi.ru



[radugazvukov](#)



8 (968) 666 30 10